





Calib'Box L™

FT 13673 A_FR


Préparation

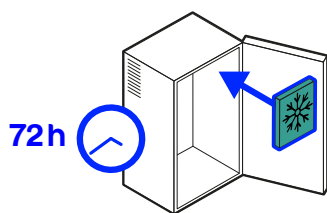

- A** Placez les 6 plaques eutectiques (4 grandes + 2 petites) dans la chambre froide négative. Sortez-les après 48h à 72h

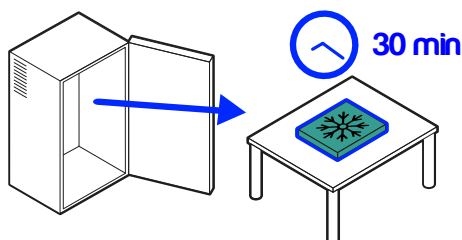


- B** Mettez les plaques à T° ambiante pendant 30 minutes (60' max). Pendant ce temps, sortez les LoRa SPYs des équipements. Identifiez-les pour faciliter le remontage.

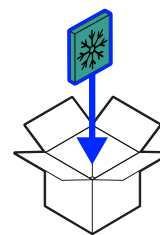

- C** Placez les plaques dans la Calib'Box avec les sondes de T° en suivant les étapes 1 à 6

Montage

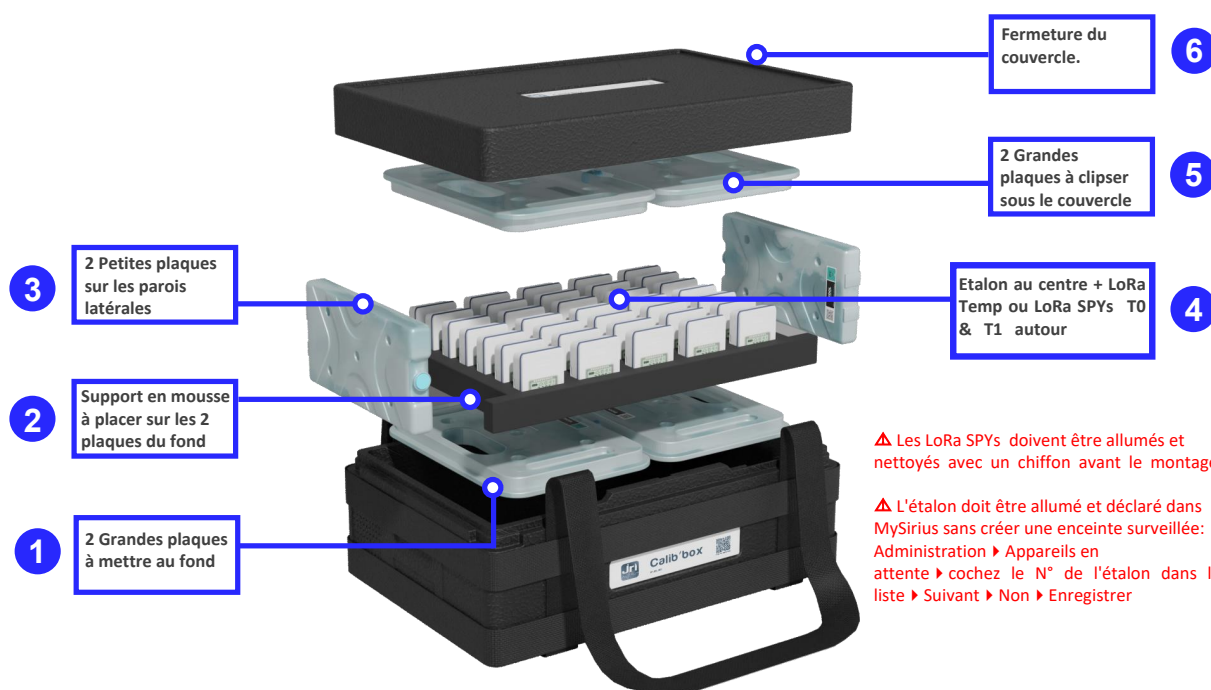


Lancement

- D** Se connecter à MySirius avec un compte Administrateur : Menu Métrologie ▶ Auto-étalonnage et se laisser guider par l'assistant. Un achat d'un pack d'auto-étalonnages se fait en cliquant sur [Acheter des packs](#). Le lancement se fait en cliquant sur [Créer un auto-étalonnage](#). Sélectionnez Calib'Box L ▶ Plaques eutectiques puis renseigner le N° de la Box dans Référence. Sélectionnez l'unité C° et l'étalon puis renseigner vos coordonnées avant de passer à l'étape suivante. Une notification est envoyée par le système à la fin de l'opération pour vous inviter à remettre les sondes dans les équipements, pensez à valider pour terminer le processus. Le laboratoire de métrologie JRI édite les certificats et les met en ligne après 2 jours ouvrés.

Stockage

- E** Après l'auto-étalonnage, sortez les plaques eutectiques de la Calib'Box et attendre le séchage complet. Une fois sèches, stocker dans la Calib'Box à T° ambiante jusqu'à la prochaine utilisation. Retirez la batterie de l'étalon jusqu'à la prochaine utilisation. **Le non respect de ces consignes augmente le risque de formation de moisissures et d'usure de la batterie.**

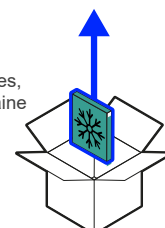

JRI, Société par actions simplifiée au capital de 4 000 000 €
Pôle logistique / 2 Rue de la Voivre / PA Technoland / BP 21 / 25490 FESCHES LE CHÂTEL / France
SIRET 380 332 858 00030 - Tél : +33 (0)3 8130 68 04 / sales@group-mms.com

Siège Social : 16 Rue Louis Rameau / CS 90050 / 95872 BEZONS Cedex / France / APE 2651B / TVA FR 02 380 332 858

www.jri.fr


원문: JRI Calib'Box L Calib'Box L · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.




Calib'Box L™

FT 13673 A_EN


Preparation

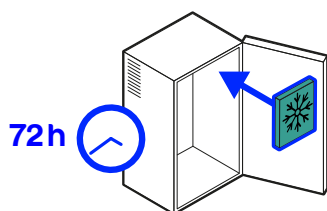

- A** Place the 6 eutectic plates (4 large + 2 small) in the negative cold room for 48 to 72 hours.

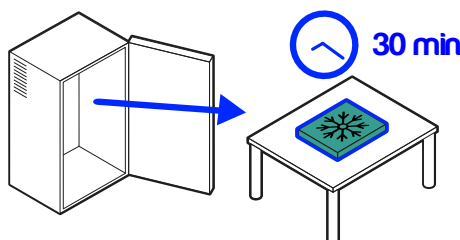


- B** Set at room temperature for 30 minutes (60' max). During this time, prepare the T° probes to be calibrated. (Identify the probes to make reassembly easier).

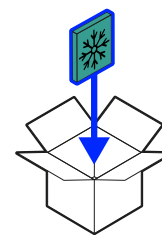

- C** Place in the Calib'Box with the T° probes as shown in the diagram below.

Setup

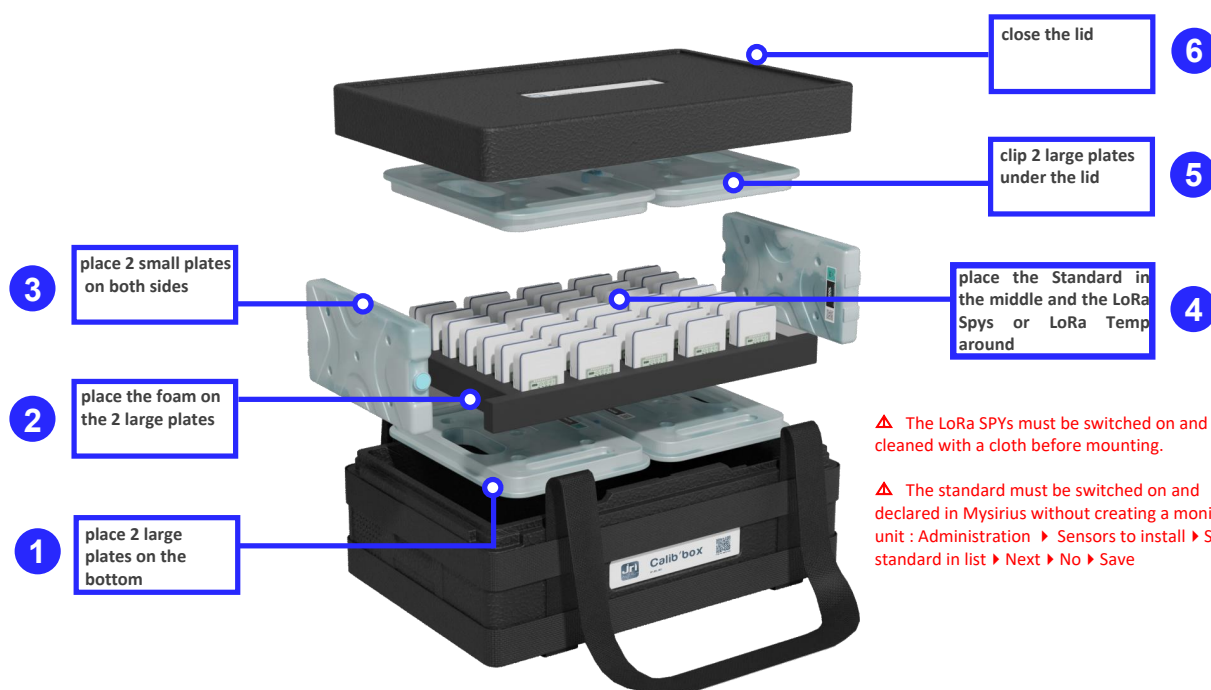

⚠ The LoRa SPYs must be switched on and cleaned with a cloth before mounting.

⚠ The standard must be switched on and declared in Mysirius without creating a monitored unit : Administration ▶ Sensors to install ▶ Select standard in list ▶ Next ▶ No ▶ Save


Launch

- D** Log on to MySirius with an Administrator account: Menu Metrology ▶ Self-calibration and let yourself be guided by the assistant. To purchase a self-calibration pack, click on [Buy self-calibration packages](#). To launch the program, click on [Create a self-calibration](#). Select Calib'Box L ▶ Eutectic plates, then enter the Box N° in Reference. Select the C° unit and the standard, then enter your contact details before proceeding to the next step. A notification is sent by the system at the end of the operation inviting you to put back the sensors inside your equipment. A validation is required to end the process. The JRI metrology laboratory issues the certificates and puts them online after 2 working days.

Storage

- E** After self-calibration, remove the eutectic plates from the Calib'Box and wait until a complete dry. Store in the Calib'Box at room temperature until next use. Remove the battery from the Standard before storage.

Not following this procedure, increases the risk of mould formation and battery discharge.

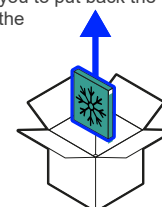

JRI, Société par actions simplifiée au capital de 4 000 000 €
Pôle logistique / 2 Rue de la Voivre / PA Technoland / BP 21 / 25490 FESCHES LE CHÂTEL / France
SIRET 380 332 858 00030 - Tél : +33 (0)3 81 30 68 04 / sales@group-mms.com

Siège Social : 16 Rue Louis Rameau / CS 90050 / 95872 BEZONS Cedex / France / APE 2651B / TVA FR 02 380 332 858

www.jri.fr

원문: JRI Calib'Box L Calib'Box L · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.