


Processus


- A** Brancher le Calib'Bath à une prise secteur (câble d'alimentation fourni avec l'appareil)



- B** Placer l'insert dans l'espace prévu à cet effet. Il se trouve en haut, au centre du bain.

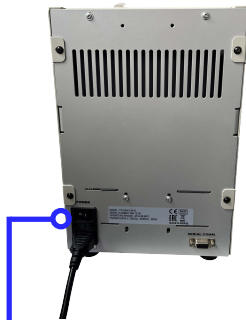


- C** Placer la sonde Étalon (SPY Reference) dans le trou le plus petit et les sondes (SPY T2 et/ou T3) dans les autres trous.

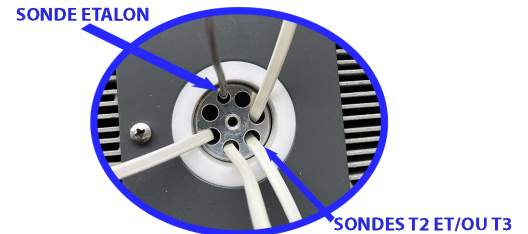

- D** Allumer le Calib'Bath à l'aide de bouton ON/OFF situé à l'arrière de l'appareil.

- E** Sélectionner la température souhaitée, via l'interface. Le bain va atteindre la température cible progressivement.

Comment programmer une température sur le Calib'Bath ?

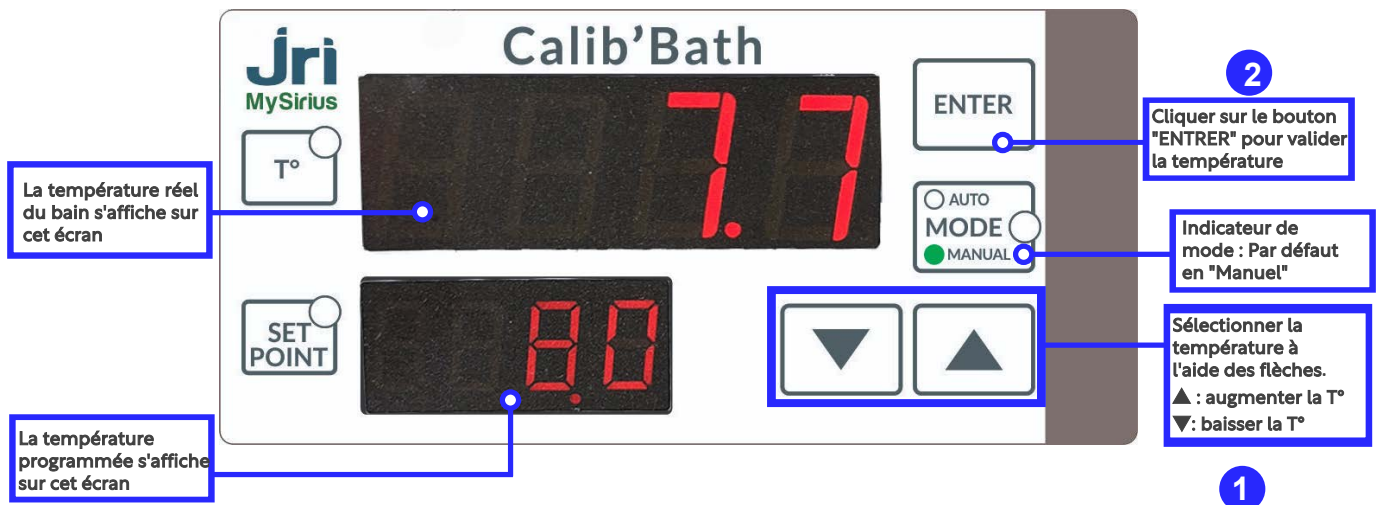

Utilisation via MySirius

- Aller sur MySirius > Métrologie > Auto-étalonnage ou MySirius Etalonnage pour déclarer le Calib'Bath dans les moyens d'étalonnage.
- Une fois l'étalon déclaré et le programme créé, vous pourrez lancer votre opération métrologique.

Stockage

Après l'auto-étalonnage/l'étalonnage, éteindre le four en appuyant sur le bouton ON/OFF situé à l'arrière de l'appareil, attendre que le four atteigne à nouveau une T° ambiante. Retirer les sondes et la sonde étalon du Calib'Bath. Puis stocker le Calib'Bath à T° ambiante jusqu'à la prochaine utilisation.

JRI, Société par actions simplifiée au capital de 4 000 000 €
Pôle logistique / 2 Rue de la Voivre / PA Technoland / BP 21 / 25490 FESCHES LE CHÂTEL / France
SIRET 380 332 858 00030 - Tél : +33 (0)3 81 30 68 04 / Fax : +33 (0)3 81 30 60 99 / sales@group-mms.com
Siège Social : 16 rue Louis Rameau / CS 90050 / 95872 BEZONS Cedex / France / APE 2651B / TVA FR 02 380 332 858

www.jri-mms.com

원문: JRI Calib'Bath Calib'Bath · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

Process


- A** Connect Calib'Bath to a power outlet (power cable supplied)



- B** Place the insert in the space provided. It is located at the top, in the center of the bath.




- C** Place the standard probe (SPY Reference) in the smallest hole and the probes (SPY T2 and/or T3) in the other holes.

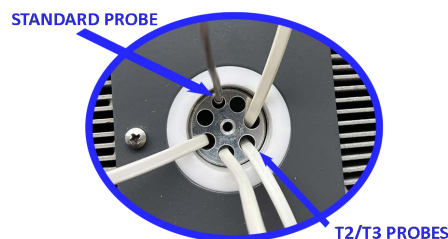

- D** Switch on Calib'Bath using the ON/OFF button on the back of the unit.

- E** Select the desired temperature via the interface. The bath will gradually reach the target temperature.

How do I set a temperature on the Calib'Bath?

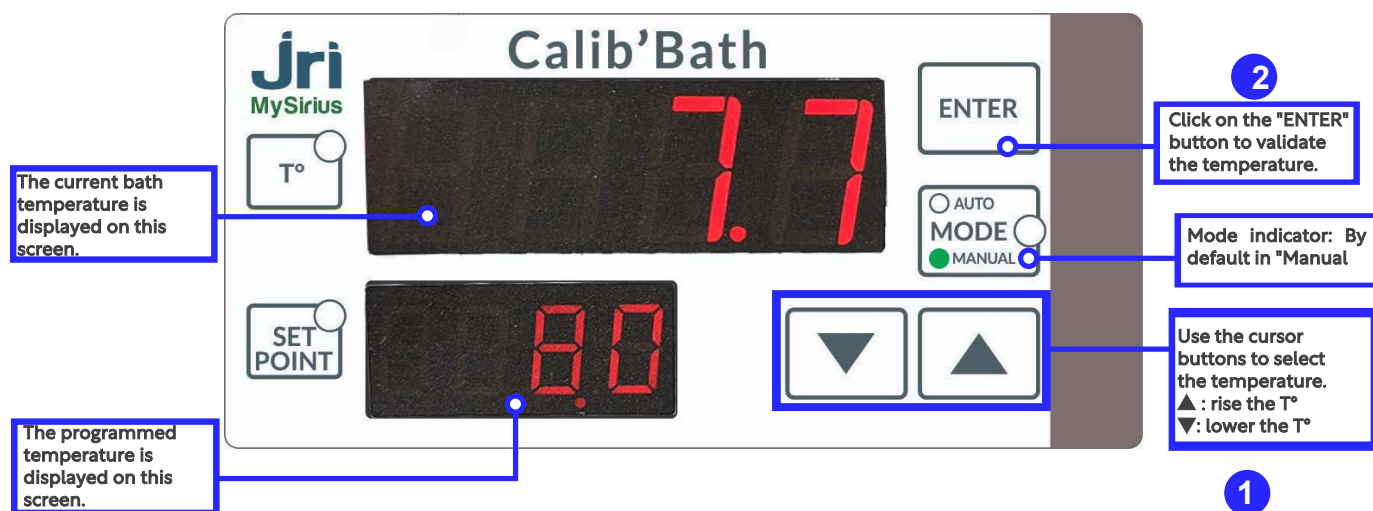

Use through MySirius

- Go to MySirius > Metrology > Self-Calibration or MySirius Calibration to declare the Calib'Bath as an calibration environment.
- Once the standard has been declared and the program created, you can launch your metrological operation.

Storage

After self-calibration/calibration, switch off the oven by pressing the ON/OFF button on the back of the unit, and wait for the oven to return to room temperature. Remove the probes and standard probe from the Calib'Bath. Store Calib'Bath at room temperature until next use.

JRI, Société par actions simplifiée au capital de 4 000 000 €
Pôle logistique / 2 Rue de la Voivre / PA Technoland / BP 21 / 25490 FESCHES LE CHÂTEL / France
SIRET 380 332 858 00030 - Tél : +33 (0)3 81 30 68 04 / Fax : +33 (0)3 81 30 60 99 / sales@group-mms.com
Siège Social : 16 rue Louis Rameau / CS 90050 / 95872 BEZONS Cedex / France / APE 2651B / TVA FR 02 380 332 858

www.jri-mms.com

원문: JRI Calib'Bath Calib'Bath · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.