





Calib'Box S™

FT 13672 D_FR


Préparation

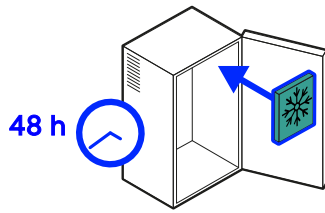

- 1 Placez les 4 plaques eutectiques (2 grandes + 2 petites) dans une chambre froide négative (-20°C). Sortez-les après 48h

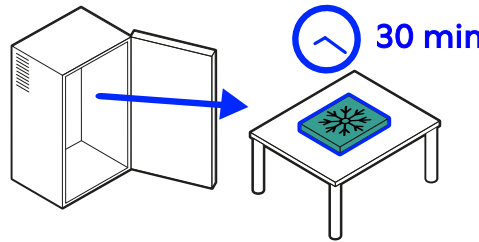

- 2 Mettez les plaques à T° ambiante pendant 30 minutes (60' max). Pendant ce temps, sortez les Nano SPYs de vos équipements. Identifiez-les pour faciliter le remontage.

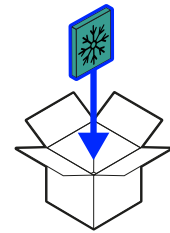


- 3 Placez les plaques dans la Calib'Box avec les sondes en suivant les étapes 4 à 9 puis connectez-vous à MySirius pour lancer l'étalonnage (étape 10)

Montage

⚠ Les Nano SPYs doivent être allumés et nettoyés avec un chiffon avant le montage.

⚠ Ne jamais mettre plus de 8 Nano SPYs par étalonnage. Si vous avez plus de 8 sondes, relancer un autre étalonnage en recommençant par l'étape 1.

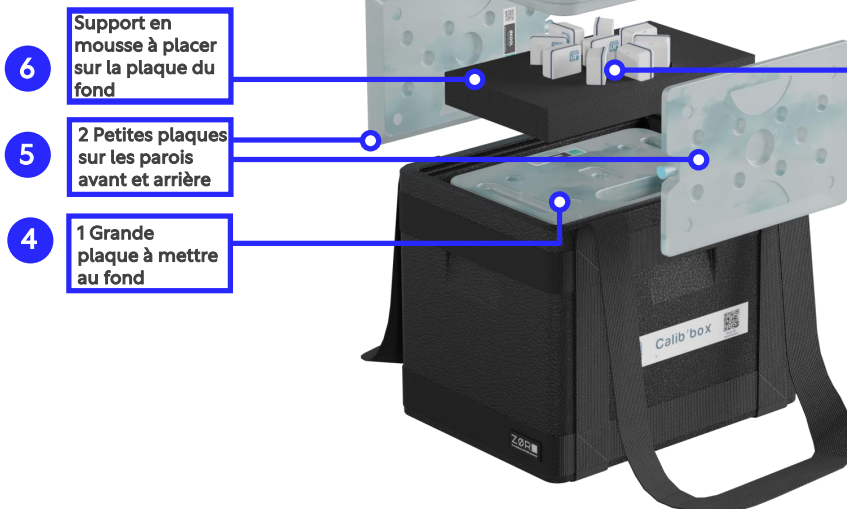


- 6 Support en mousse à placer sur la plaque du fond
- 5 2 Petites plaques sur les parois avant et arrière
- 4 1 Grande plaque à mettre au fond

9 Mettre la box fermée à côté du Link avant de lancer l'étalonnage.

8 1 Grande plaque à clipser sous le couvercle

7 Étalon au centre + 8 Nano SPYs T1 & T2 autour (Sans coques)

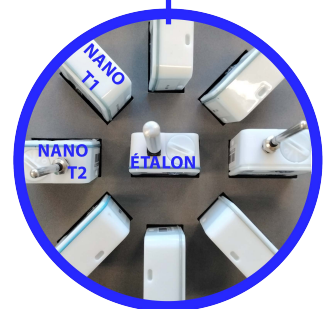

⚠ La sonde numérique doit être branchée sur l'étalon.


⚠ L'étalon doit être allumé et déclaré dans MySirius sans créer une enceinte surveillée : Administration ▶ Appareils en attente ▶ cochez le N° de l'étalon (voir étiquette sur le côté de l'appareil) dans la liste ▶ Suivant ▶ Non ▶ Enregistrer

Procédure d'étalonnage

- 10 Se connecter à MySirius avec un compte Administrateur : Menu Métrologie ▶ Auto-étalonnage et se laisser guider par l'assistant. Un achat d'un pack d'auto-étalonnages se fait en cliquant sur [Acheter des packs](#) Le lancement se fait en cliquant sur [Créer un auto-étalonnage](#) Sélectionnez Calib'Box S ▶ Plaques eutectiques puis renseigner le N° de la Box (voir étiquette sur le couvercle) dans Référence. Sélectionnez l'unité C° et le N° de l'étalon (voir étiquette sur le côté de l'appareil) puis renseigner vos coordonnées avant de passer aux étapes suivantes. Une notification (mail + SMS) est envoyée par le système à la fin de l'opération (entre 2 et 3h) pour vous inviter à remettre les sondes dans les équipements ▶ Confirmation requise sur MySirius en cliquant sur ENREGISTRER pour terminer le processus. Le laboratoire de métrologie JRI édite les certificats et les met en ligne sur MySirius entre 2 et 3 jours ouvrés.

Stockage

- 11 Après l'auto-étalonnage, retirez la pile de l'étalon, sortez les plaques eutectiques de la Calib'Box et attendre le séchage complet. Une fois sèches, stockez dans la Calib'Box avec l'étalon à T° ambiante jusqu'à la prochaine utilisation.
Le non respect de cette consigne augmente le risque de formation de moisissures et l'usure rapide de la pile de l'étalon.

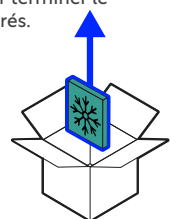

Pour toute demande de support technique, merci d'ouvrir un ticket sur la plateforme JRI-MySirius en cliquant sur [JRI SUPPORT](#). support@group-mms.com | 0892 680 933 (0.29€ht/min)


원문: JRI Calib'Box S Calib'Box S · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.




Calib'Box S™

FT 13672 D_EN


Preparation

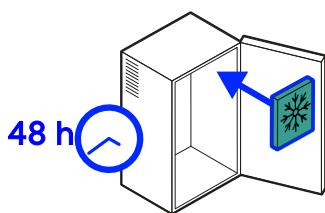

- 1 Place the 4 eutectic plates (2 large + 2 small) in a freezer (-20°C) for 48 hours.

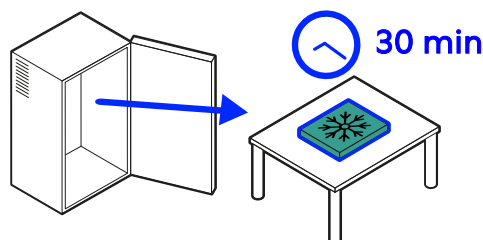

- 2 Set at room temperature for 30 minutes (60' max). Meanwhile, prepare the Nano SPYs for calibration. Identify the probes to make reassembly easier.

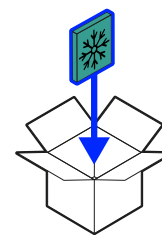


- 3 Put the plates in the Calib'Box with the Nano SPYs following steps 4 to 9 as shown below.

Setup

⚠ The Nano SPYs must be turned on and cleaned with a cloth before.

⚠ Never put more than 8 Nano SPYs per calibration process. If you have more than 8 devices, please restart the whole process from step 1.

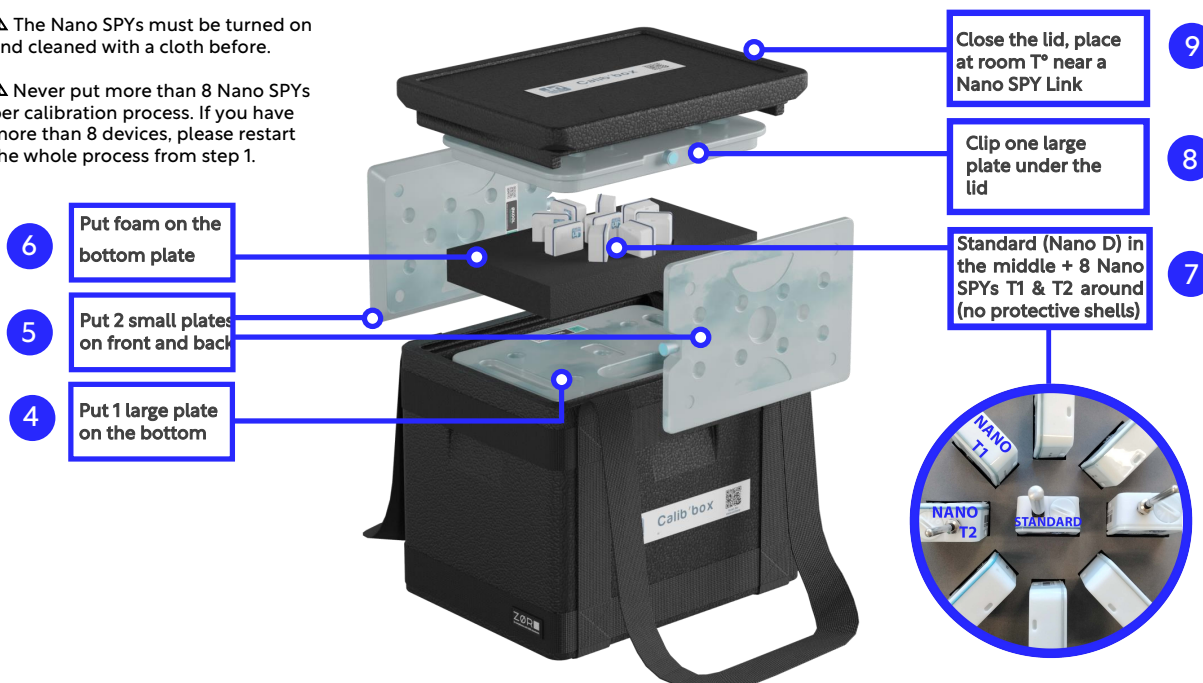

⚠ The digital probe should be connected on the standard device.


⚠ The standard must be turned on and declared in Mysirius without creating a monitored unit : Administration
 ▶ Sensors to install ▶ Select standard serial N# in the list (see side label on device) ▶ Next ▶ No ▶ Save

Launch

- 10 Log on to MySirius with an Administrator account: Menu Metrology ▶ Self-calibration and follow the assistant. To purchase a self-calibration service, click on [Buy self-calibration packages](#). To launch the process, click on [Create a self-calibration](#) Select Calib'Box S ▶ Eutectic plates, then enter the Box serial N# (See label on the Box lid) in Reference. Select the C° unit and the standard serial N# (See side label on device), then enter your contact details before proceeding to the next step. An email/SMS notification is sent by the system at the end of the operation (2 to 3h) inviting you to put back the sensors inside your equipment. A validation of this step on MySirius is required to end the process. The JRI metrology laboratory edits the certificates online after 2 working days.

Storage

- 11 After self-calibration, remove the eutectic plates from the Calib'Box and wait until a complete dry. Store in the Calib'Box at room temperature until next use. Remove the battery from the Standard before storage.
Not following this procedure, increases the risk of mould formation and battery withdraw.

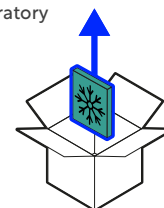

For all technical support requests, please open a ticket on the JRI-MySirius platform by clicking on [JRI SUPPORT](#).
support@group-mms.com